

	MENGUNAKAN DAN MELEPAS MASKER RESPIRATORY N95		
	No. Dokumen SPO/PHBW/KPI-003	Revisi: 01	Halaman: 1/6
SPO	Tanggal Terbit: 01 Januari 2025	Ditetapkan: Direktur Rumah Sakit  Dr. AGUS MARVIANTO	
PENGERTIAN	Respirator N95 atau FFP2 (health care particular respirator), merupakan masker khusus dengan efisiensi tinggi untuk melindungi petugas dari partikel berukuran <5 mikron yang dibawa melalui udara.		
TUJUAN	Melindungi tenaga medis dan pasien atau orang lain yang berada di daerah beresiko terinfeksi dari kemungkinan tertularnya penyakit infeksi yang dapat menular melalui udara atau droplet.		
KEBIJAKAN	Sesuai SK Direktur Rumah Sakit Primaya Nomer: 051/PER/DIR/PHBW/VI/2021 Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Primaya		
PROSEDUR	1. Menggunakan Masker respiratory: a. Lakukan kebersihan tangan b. Genggamlah respiratory dengan satu tangan, posisikan sisi depan bagian hidung pada ujung jari- jari petugas, biarkan tali pengikat respirator menjuntai bebas di bawah tangan. c. Posisikan respirator di bawah dagu, dan sisi depan untuk hidung berada di atas. d. Tariklah tali pengikat respirator yang atas, dan posisikan tali agak tinggi, di belakang kepala,		

	MENGGUNAKAN DAN MELEPAS MASKER RESPIRATORY N95		
	No. Dokumen SPO/PHBW/KPI-003	Revisi: 01	Halaman: 2/6
PROSEDUR	<p>di atas telinga. Tariklah tali pengikat, respirator yang bawah dan posisikan tali pada kepala bagian atas (posisi tali menyilang).</p> <p>e. Letakkan jari-jari kedua tangan di atas bagian hidung yang terbuat dari logam. Tekan sisi logam tersebut (gunakan dua jari dari masing-masing tangan) mengikuti bentuk hidung. Jangan menekan respiratori dengan satu tangan, karena dapat mengakibatkan respirator bekerja kurang efektif.</p> <p>f. Tutup bagian depan respiratori dengan kedua tangan, dan hati-hati agar posisi respirator tidak berubah.</p> <p>g. Lakukan fit tes dengan cara hembuskan napas kuat-kuat. Tekanan positif di dalam respirator berarti tidak ada kebocoran. Bila terjadi kebocoran atur posisi dan/atau ketegangan tali. Uji kembali kerapatan respirator. Ulangi langkah tersebut.</p> <p>h. Atau dengan cara ke dua yaitu tarik napas dalam-dalam. Bila tidak ada kebocoran, tekanan negatif di dalam respirator akan membuat respirator menempel ke wajah. Kebocoran akan menyebabkan hilangnya tekanan negatif di dalam respirator akibat udara masuk melalui celah-celah segelnya.</p>		

MENGGUNAKAN DAN MELEPAS MASKER RESPIRATORY N95

No. Dokumen:
SPO/PHBW/KPI-003

Revisi:
01

Halaman:
3/6

PROSEDUR

MENGGUNAKAN RESPIRATORY N95



- Genggamlah respirator dengan satu tangan, posisikan sisi depan bagian hidung pada ujung jari-jari anda, biarkan tali pengikat respirator menjuntai bebas dibawah tangan anda



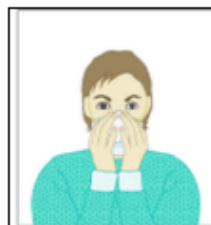
- Posisikan respirator dibawah dagu anda dan sisi untuk hidung berada diatas




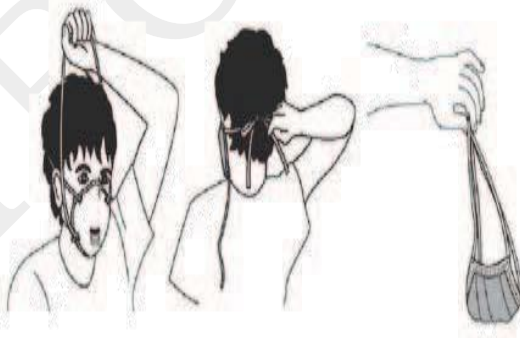
- Tariklah tali pengikat respirator yang atas dan posisikan tali agak tinggi dibelakang kepala anda diatas telinga. Tariklah tali pengikat respirator yang bawah dan posisikan tali pada kepala bagian atas (posisi tali menyilang)



- Letakan jari-jari kedua tangan anda diatas bagian hidung yang terbuat dari logam. Tekan sisi logam tersebut (gunakan dua jari dari masing-masing tangan) mengikuti bentuk hidung anda. Jangan menekan respirator dengan satu tangan karena dapat mengakibatkan respirator bekerja kurang efektif



- Tutup bagian depan respirator dengan kedua tangan, dan hati-hati agar posisi respirator tidak berubah

	MENGGUNAKAN DAN MELEPAS MASKER RESPIRATORY N95		
	No. Dokumen: SPO/PHBW/KPI-003	Revisi: 01	Halaman: 4/6
PROSEDUR	2. Melepas respiratori <ol style="list-style-type: none"> Lakukan kebersihan tangan Lepaskan tali bagian bawah yang berada di belakang kepala, posisi kepala menunduk agak kedepan. Lepaskan tali bagian atas yang berada di belakang telinga, posisi kepala menunduk agak kedepan. Buang masker respiratory ke tempat sampah infeksi jika petugas melakukan tindakan aerosol Lakukan kebersihan tangan  <p>Langkah melepas masker</p>		
UNIT TERKAIT	Seluruh unit di Rumah Sakit Primaya		
REFERENSI	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.		

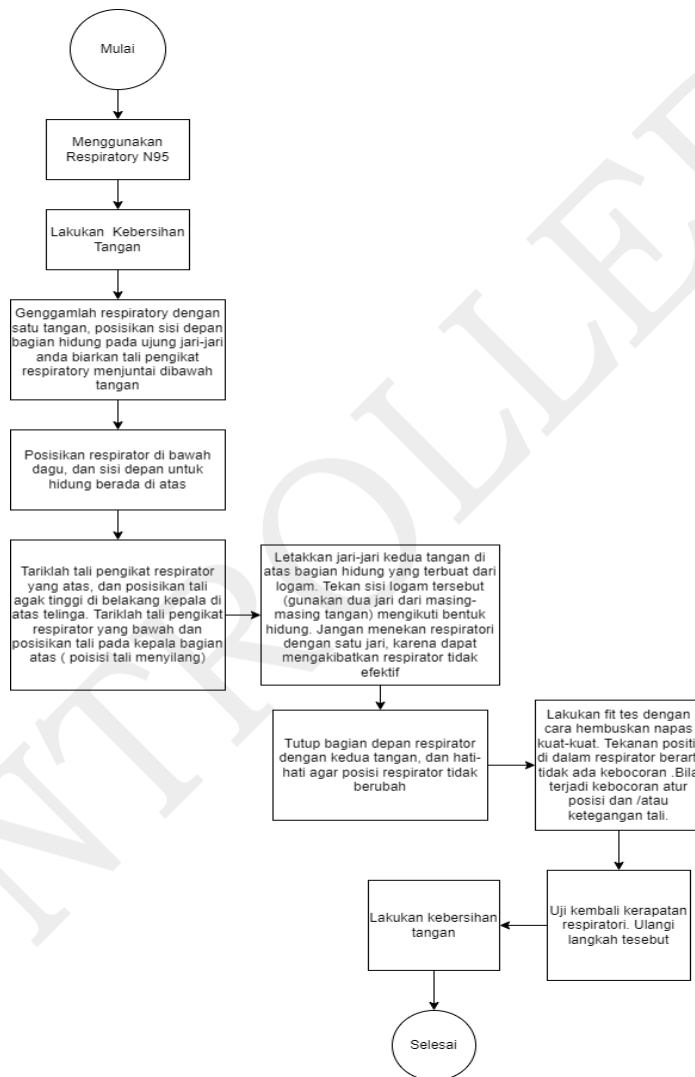
MENGGUNAKAN DAN MELEPAS MASKER RESPIRATORY N95

No. Dokumen:
SPO/PHBW/KPI-
003

Revisi:
01

Halaman:
5/6

Menggunakan respiratory N95



**MENGGUNAKAN DAN MELEPAS MASKER
RESPIRATORY N95**

No. Dokumen:
SPO/PHBW/KPI-
003

Revisi:
01

Halaman:
6/6

Melepas Respiratory N95

